




CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Occlusiesystemen

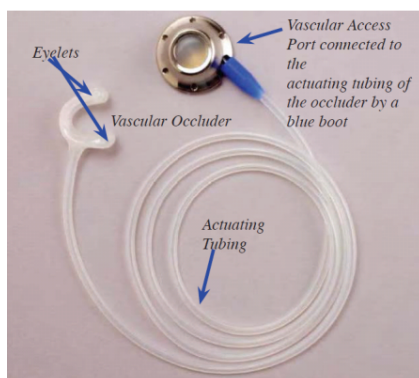

Eigenschappen

Oppompbare silicone manchetten

Deze oppompbare silicone manchetten dienen om bloedvaten en zachte organen te occluderen en af te sluiten, zonder tractie uit te oefenen op het omliggende weefsel of het te verplaatsen. Ze zijn zacht en flexibel, hebben een gladde buitenwand en leveren betrouwbare prestaties bij permanente implantatie. De volledige vasculaire constrictie maakt nauwkeurig onderzoek van het vaatstelsel en een zachte constrictie van zachte organen voor acuut en chronisch onderzoek mogelijk. Occlusiesystemen worden uitwendig aangebracht of aangesloten op een van de vascular access ports voor een volledig subcutaan systeem. Er zijn gebruiksinstructies beschikbaar.

De occlusiesystemen zijn verkrijgbaar met een standaardlumen van 1,5-24 mm. Er zijn ook modellen voor veeleisende toepassingen verkrijgbaar met een lumen van 10-24 mm. Deze Heavy Duty/HD* occlusiesystemen zijn ontworpen om beter bestand te zijn tegen breuk, met een dikker manchet en diafragma om een grotere tegendruk te weerstaan dan fysiologisch normaal is. Toch blijven ze heel gevoelig en leveren ze consistent uitstekende resultaten.

Bestelinformatie

Catalogus-	Lumen	Manchet-	Manchet	
nr.	diameter	breedte	dikte	Algemene Informatie



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

OC1,5	1,5 mm	3,5 mm	1,5 mm	De afmetingen van het lege occlusiemanchet zijn doorgaans bepalend voor de selectie van het juiste formaat. De pompslang is 90 cm lang. Langere lengten zijn verkrijgbaar op verzoek. Een lengte van meer dan 2 meter wordt niet aanbevolen. Diameters pompslang: OC 1,5-10 inclusief HD*-reeks: ID 0,8 mm x UD 1,6 mm OC 12-24 inclusief HD*-reeks: ID 1,0 mm x UD 2,1 mm
OC2	2 mm	5 mm	1,5 mm	
OC3	3 mm	5 mm	1,5 mm	
OC5	5 mm	5 mm	2 mm	
OC8	5 mm	7 mm	2 mm	
OC12	12 mm	8 mm	2,5 mm	
OC14	14 mm	8 mm	2,5 mm	
OC16	16 mm	12 mm	2,5 mm	
OC20	20 mm	12 mm	2,5 mm	
OC24	24 mm	12 mm	2,5 mm	
OC10HD	10 mm	9 mm	3 mm	
OC12HD	12 mm	9 mm	3 mm	
OC14HD	14 mm	9 mm	3 mm	
OC16HD	16 mm	13 mm	4 mm	

Voor een occlusiesysteem met een poort vermeldt u het poortmodel en de lumendiameter van het gewenste occlusiesysteem. Als u enkel het occlusiesysteem nodig heeft, vermeldt u enkel de lumendiameter. Bijvoorbeeld: Het catalogusnummer CP4-OC12 verwijst naar een middelgrote titanium ClearPort met een occlusiesysteem met een 12mm-lumen. Als u een occlusiesysteem voor intensief gebruik nodig heeft, voeg dan het suffix HD toe na de lumendiameter: CP4-OC12HD.

Gebruik van het Occlusiesysteem

Plaats het occlusiemanchet rond het blootliggende bloedvat en fixeer het met hechtingsmateriaal door de oogjes.

Injecteer met een spuit met stompe naald lucht of vloeistof in de pompslang om het diafragma op te pompen en zo het bloedvat te occluderen. Klamp de slang dicht om het bloedvat geoccludeerd te houden. Om het leeg te laten lopen hoeft u enkel de lucht of vloeistof te aspireren.



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be