




CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Appareil de chauffage Unité de contrôle MS/CU-MS

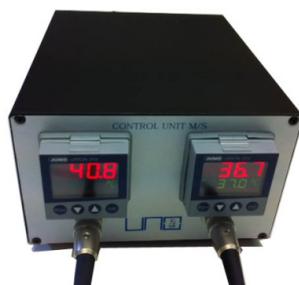

Unité de contrôle M/S

Comme l'unité de contrôle 02, l'**unité de contrôle M/S** peut être connectée à un appareil de chauffage et à une sonde de température. Toutefois, l'interaction entre les 2 connexions vous permet de **régler la température rectale requise de l'animal**. La sonde rectale mesure la température de l'animal, et un feedback est renvoyé au contrôle de l'appareil de chauffage afin de maintenir la température de l'animal aussi constante que possible. Une fonctionnalité de sécurité est intégrée pour empêcher la surchauffe lorsque la sonde rectale ne se situe pas dans l'animal. L'élément chauffant ne chauffe pas au-dessus de 42 °C (ce qui est également une valeur acceptable pour la peau humaine).

Grâce à l'unité de contrôle M/S, vous disposez d'une **autorégulation** et vous n'avez pas besoin d'ajuster manuellement les réglages de température pendant la procédure.

Numéro de commande

Bestelnummer	
180000124	Unité de contrôle MS
180000028	Plateau chauffant / 34,5 x 23 cm
180000128	Plateau chauffant / 18,5 x 11 cm
180000027	Unité de chauffage en U
180000029	Unité de chauffage à extension caudale
180000066	Sonde de température
180000026	Temperatuursond - rat



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be